


# Bolsa de morcelación LiNA Xcise™

Sistema de contención y recuperación de tejidos



Contenido. No restringido.

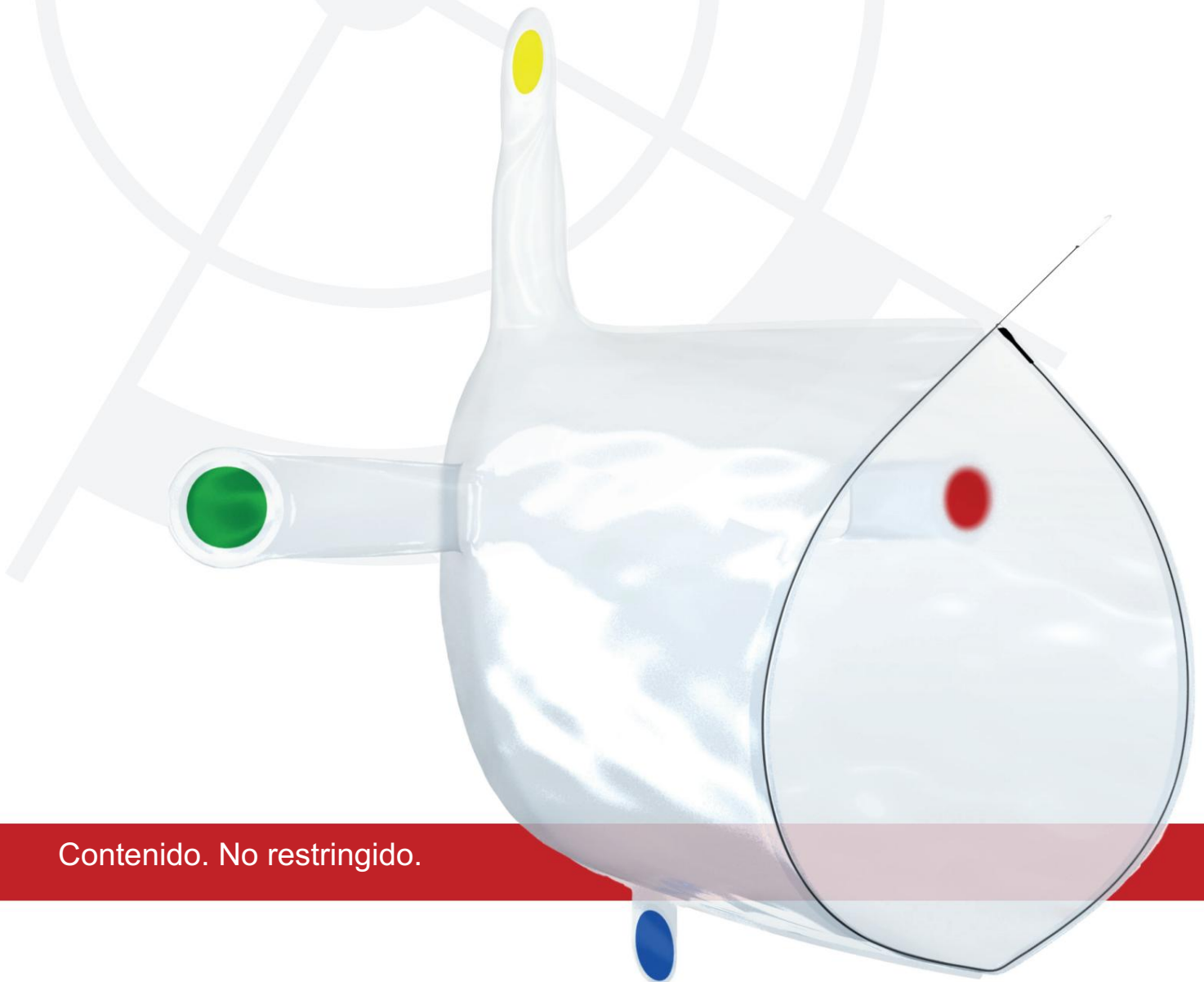

Innovación en Ginecología

# Bolsa de morcelación LiNA Xcise™

Sistema de contención y recuperación de tejidos



**Sencillez** La bolsa está pre enrollada en un introductor para facilitar una sencilla  
Inserción mediante incisión o trocar.

Las pestañas codificadas por colores ayudan con la identificación y el posicionamiento de la bolsa una vez en la cavidad abdominal.

Se puede utilizar junto con técnicas laparoscópicas estándar y sin instrumentación especializada adicional.



**Visibilidad** El cuerpo de poliuretano termoplástico (TPU) transparente permite  
Visualización de los tejidos circundantes, para poder saber si existe riesgo de contacto.


Los puertos adicionales significan que solo se debe insertar el laparoscopio a través de la incisión umbilical, lo que facilita una visibilidad sin concesiones dentro de la bolsa.



**Flexibilidad** La bolsa se adapta a la cavidad abdominal bajo insuflación,  
mejorando la visibilidad del tejido y reduciendo el potencial de interferencia con la instrumentación.

El diseño de múltiples puertos significa que no se necesita una incisión de gran tamaño, lo que reduce potencialmente el traumatismo tisular.

El acceso adicional se facilita mediante 2 puertos de trabajo opcionales.  
Simplemente elija el puerto necesario, ábralo y úselo. Luego, ciérrelo con los hilos de sutura antes de la extracción.

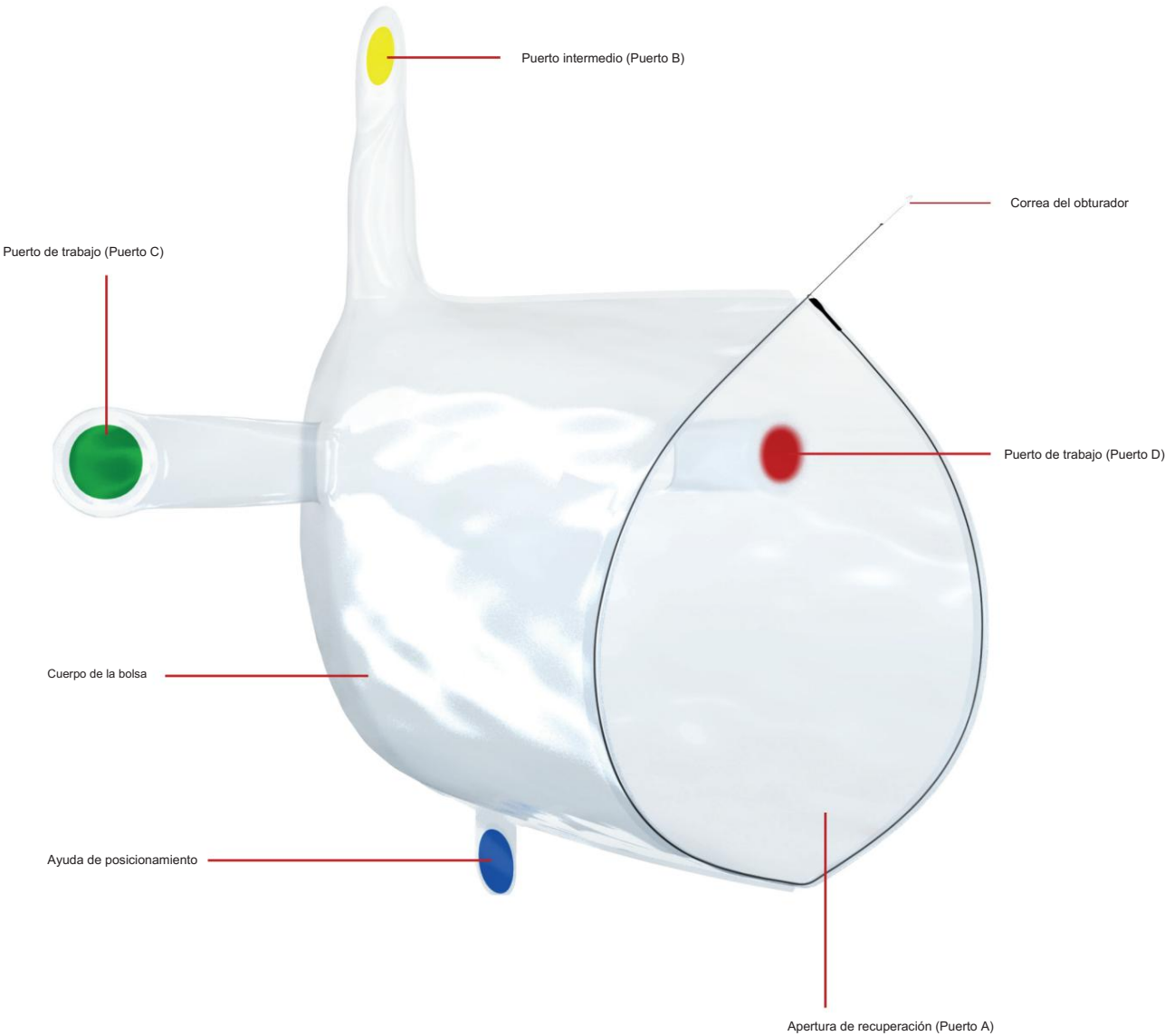

## Especificaciones técnicas

Material	Poliuretano termoplástico transparente (TPU) Nota: El material no contiene látex. Para más información, contacte con LiNA Medical.
Dimensiones	Cuerpo - 320 mm x 240 mm Abertura de recuperación - Ø160mm Puertos de trabajo: instrumentos de hasta 15 mm
Volumen	3,5 litros
Puertos de acceso	4 (1 x Abertura de recuperación, 1 x Puerto intermedio, 2 x Puertos de trabajo)
Método de cierre	Apertura de recuperación: mediante correa de obturador Morcelador/Puertos de trabajo – Suturas (3 unidades incluidas en el paquete)
Morcelador compatible	Morcelador laparoscópico inalámbrico LiNA Xcise™. Nota: Otros morceladores también son compatibles.



# Bolsa de morcelación LiNA Xcise™

Sistema de contención y recuperación de tejidos



**Indicaciones de uso:**

La bolsa de morcelación LiNA Xcise™ está diseñada para la morcelación laparoscópica de tejido en un sistema cerrado. Se utiliza para reducir la diseminación tisular intraoperatoria.



**Información para pedidos:**


Bolsa de morcelación LiNA Xcise™

Código de producto	Descripción	Cantidad de unidades
MOR-BOLSA-10-FILAS	Bolsa de morcelación LiNA Xcise™ : Bolsa de contención y recuperación de tejido de poliuretano termoplástico para procedimientos ginecológicos mínimamente invasivos. Compatible con el morcelador eléctrico inalámbrico LiNA Xcise. Estéril, de un solo uso.	Caja de 10 unidades

©2022 LiNA Medical ApS. Todos los derechos reservados.

EN ISO 13485:2016  
Sistema de Gestión de Calidad

Distribuidor:

 BOWA-electronic GmbH & Co. KG, Heinrich-Hertz-Strasse 4-10, 72810 Gomaringen | Alemania  
Teléfono +49 7072-6002-0, Fax +49 7072-6002-33, info@bowa-medical.com | bowa-medical.com

■ Distribuidor exclusivo para países designados: LiNA Medical International Operations AG, Platz 3, 6038 Root D4, Suiza.

