



DURGALAB, S. L. U.
DISTRIBUCIONES DE
MATERIAL QUIRURGICO

Tlfonos.: 956 891843 - 856 118716 - Fax: 956 895647
E - mail: office@ono.com
www.durgalab.com

Innovation in Gynaecology



LiNA PowerBlade™

*Fórceps multifuncional de un solo uso
para coagulación y corte bipolares*



Cables bipolares LiNA disponibles para los siguientes generadores ESU:




REF 360150L para Valleylab



REF 360131L para Erbe, Select, Storz



REF 360139L para Martin, Berthold, Aesculap, Wolf

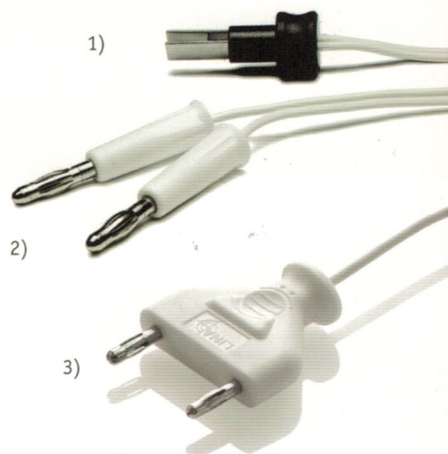

Disponibles con tres conectores diferentes:

- 1) Conector macho bipolar europeo
- 2) Conector macho de 2 x 4 mm (enchufe banana)
- 3) Conector macho bipolar de 2 x 4 mm con distancia fija de 29 mm



LiNA PowerBlade 0459

Información para pedido:

REF.	LiNA PowerBlade - Para un solo uso - Empaquetado individualmente - Estéril	Embalaje
5005-E	5 mm (diám.) - 330 mm de longitud - con cable de 25 cm y conector macho bipolar europeo	Caja de 5
5005-E-160	5 mm (diám.) - 160 mm de longitud - con cable de 25 cm y conector macho bipolar europeo	Caja de 5
5005-E-420	5 mm (diám.) - 420 mm de longitud - con cable de 25 cm y conector macho bipolar europeo	Caja de 5
5010-E	10 mm (diám.) - 320 mm de longitud - con cable de 25 cm y conector macho bipolar europeo	Caja de 5
5010-E-160	10 mm (diám.) - 160 mm de longitud - con cable de 25 cm y conector macho bipolar europeo	Caja de 5
5005-E-C	5 mm (diám.) mordazas curvas - 330 mm de longitud - con cable de 25 cm y conector macho bipolar europeo	Caja de 5
5005-E-C-160	5 mm (diám.) mordazas curvas - 160 mm de longitud - con cable de 25 cm y conector macho bipolar europeo	Caja de 5
5005-E-C-420	5 mm (diám.) mordazas curvas - 420 mm de longitud - con cable de 25 cm y conector macho bipolar europeo	Caja de 5
360150L	Cable bipolar - Reutilizable - cable de 4,5 m con enchufe de seguridad para Valleylab	1 per Caja
360131L	Cable bipolar - Reutilizable - cable de 4,5 m con enchufe de seguridad para ERBE, Select, Storz	1 per Caja
360139L	Cable bipolar - Reutilizable - cable de 4,5 m con enchufe de seguridad para Martin, Berthold, Aesculap, Wolf	1 per Caja

5005	5 mm (diám.) - 330 mm de longitud - con cable de 3 m y conector macho bipolar de 2 x 4 mm	Caja de 5
5005-160	5 mm (diám.) - 160 mm de longitud - con cable de 3 m y conector macho bipolar de 2 x 4 mm	Caja de 5
5005-420	5 mm (diám.) - 420 mm de longitud - con cable de 3 m y conector macho bipolar de 2 x 4 mm	Caja de 5
5010	10 mm (diám.) - 320 mm de longitud - con cable de 3 m y conector macho bipolar de 2 x 4 mm	Caja de 5
5010-160	10 mm (diám.) - 160 mm de longitud - con cable de 3 m y conector macho bipolar de 2 x 4 mm	Caja de 5
5005-C	5 mm (diám.) mordazas curvas - 330 mm de longitud - con cable de 3 m y conector macho bipolar de 2 x 4 mm	Caja de 5
5005-C-160	5 mm (diám.) mordazas curvas - 160 mm de longitud - con cable de 3 m y conector macho bipolar de 2 x 4 mm	Caja de 5
5005-C-420	5 mm (diám.) mordazas curvas - 420 mm de longitud - con cable de 3 m y conector macho bipolar de 2 x 4 mm	Caja de 5

5005-Y	5 mm (diám.) - 330 mm de longitud - con cable de 3 m y conector macho bipolar de 2 x 4 mm con distancia fija de 29 mm	Caja de 5
5005-Y-160	5 mm (diám.) - 160 mm de longitud - con cable de 3 m y conector macho bipolar de 2 x 4 mm con distancia fija de 29 mm	Caja de 5
5005-Y-420	5 mm (diám.) - 420 mm de longitud - con cable de 3 m y conector macho bipolar de 2 x 4 mm con distancia fija de 29 mm	Caja de 5
5005-Y-C	5 mm (diám.) mordazas curvas - 330 mm de longitud - con cable de 3 m y conector macho bipolar de 2 x 4 mm con distancia fija de 29 mm	Caja de 5
5005-Y-C-160	5 mm (diám.) mordazas curvas - 160 mm de longitud - con cable de 3 m y conector macho bipolar de 2 x 4 mm con distancia fija de 29 mm	Caja de 5
5005-Y-C-420	5 mm (diám.) mordazas curvas - 420 mm de longitud - con cable de 3 m y conector macho bipolar de 2 x 4 mm con distancia fija de 29 mm	Caja de 5
5010-Y	10 mm (diám.) - 320 mm de longitud - con cable de 3 m y conector macho bipolar de 2 x 4 mm con distancia fija de 29 mm	Caja de 5
5010-Y-160	10 mm (diám.) - 160 mm de longitud - con cable de 3 m y conector macho bipolar de 2 x 4 mm con distancia fija de 29 mm	Caja de 5


LiNA PowerBlade™



funcional

Un corte limpio y preciso en todas las ocasiones


- El electrodo/cuchilla bipolar nunca se queda romo
El diseño patentado permite la transección bipolar del tejido. El corte se realiza con energía bipolar, no mediante la acción mecánica de una cuchilla
- Para su uso con todas las unidades electroquirúrgicas bipolares estándar
- Diversidad de tamaño, longitud y geometría de las mordazas

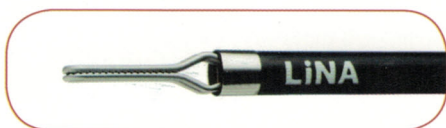

Mordazas rectas de 5 mm y 10 mm



Mordazas curvas de 5 mm

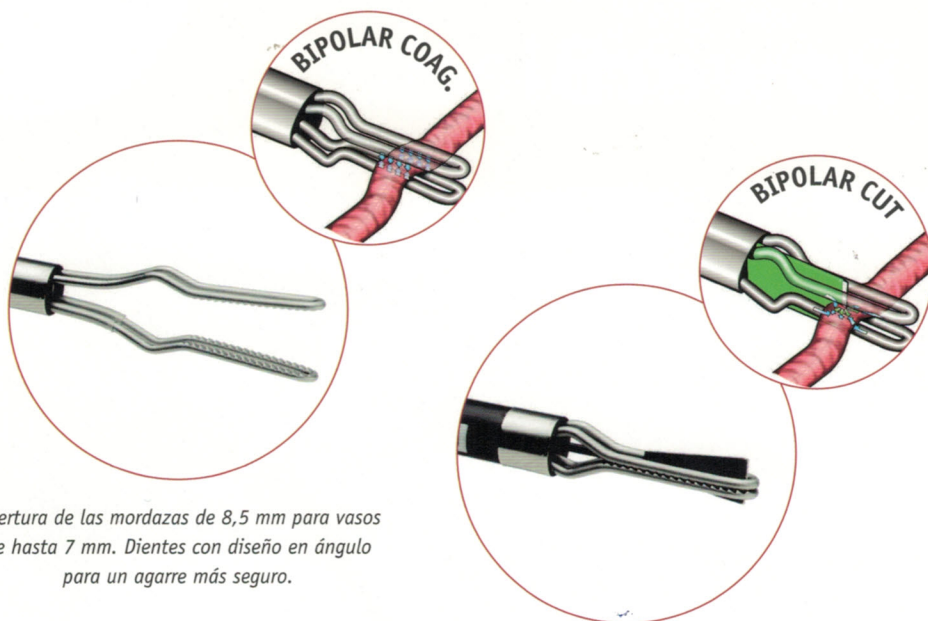

Electrodo/cuchilla de corte para corte bipolar.

versátil

LiNA PowerBlade se puede utilizar con todas las unidades electroquirúrgicas bipolares estándar. No es necesario adquirir ningún equipo para utilizar LiNA PowerBlade

- **Diversidad de funciones**
LiNA PowerBlade es un fórceps bipolar de coagulación y corte que mejora la técnica de los procedimientos de laparoscopia. Ya que se trata de un instrumento todo en uno, LiNA PowerBlade resulta ideal para varios procedimientos complejos y largos
- **Agarre**
- **Coagulación**
- **Disección**
- **Corte**

seguro

Exclusiva función de corte con potente cuchilla bipolar

- Al hacer avanzar el electrodo de corte para realizar una sección transversal, la corriente bipolar se transfiere automáticamente desde las mordazas
- La corriente electroquirúrgica pasa a través del tejido situado entre el electrodo/cuchilla de corte y las mordazas
- Mediante la realización de un corte electroquirúrgico bipolar con coagulación en la superficie del electrodo/cuchilla de corte se reduce el riesgo de hemorragia en comparación con los instrumentos de cuchillas convencionales